

STABILObed[®] är ett förstaklassigt system som används för att precist och effektivt positionera brukaren i sittande och liggande ställning. Systemet består av separata delar som för sig själva eller gemensamt används för att skapa positionering och avlastning.

Stabilobeds dynor täcks av PureMed överdrag. Ett material som är säkert för brukaren samtidigt som det är lätt att sterilisera. Delar av systemet kan användas för att immobilisera brukaren under diagnostik (såsom MRI, CT Scan eller Röntgen). Beroende på användningsområdet så består fyllningen av nedan material.



Granulat - Små polysterenkulor (cellplast) som gör att dynan formar sig efter kroppen. Med PureMed överdraget som ångandas så tillåts luft att cirkulera genom dynan runt brukarens kropp.



VISmemo - En typ av memory skum. Detta formar sig direkt vid tryck men blir därefter särskilt formbart ju högre värmen blir. Detta gör att dynan blir extra där det finns risk för trycksår.



Komfort skum - Mjukt kallskum skum med flera små håligheter fyllda med luft. Detta används för att hålla brukaren på plats på ett mjukt och skönt sätt.




Avlastande skum - Hårdare skum för positionering



Silikon - Runda silikonfiber med 0,5 cm diameter. Detta ger en väldigt lätt mjuk och bekväm dyna.

✓ **Självhäftande elastiska band** - Dessa är tillverkade i mjuk velour i grå eller vit färg. De agerar som en bas för Stabilo Dynorna. Stabilodynorna är utrustade med kardborre så att de inte rör sig på madrassen. Överdraget fungerar i normala sjukhussängar. Det finns i tre olika storlekar och har elastiska band för att lättare kunna fästas vid madrass.

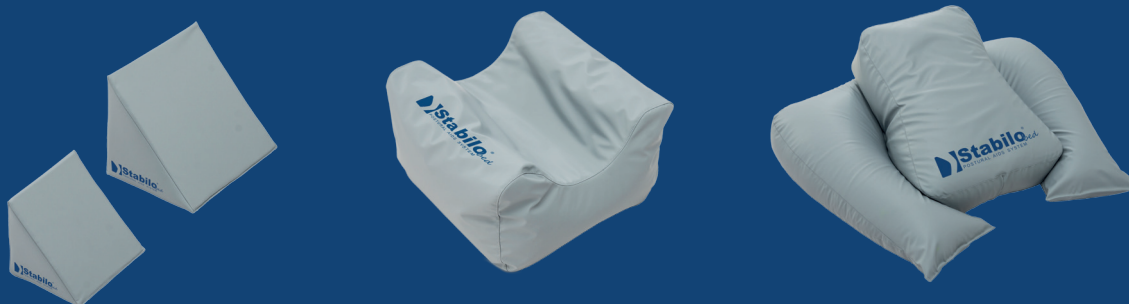

▶ Använda STABILOBEDs system

STABILOBeds system är synnerligen användbara i följande fall:


- ✓ Immobilisering vid röntgen;
- ✓ ortopediska och neurologiska sjukdomar
Intensivvård
- ✓ rehabilitering/ positionsterapi
Långtidsbehandlingar
- ✓ Postoperativ immobilisering
- ✓ Avlasta diverse kroppsdelar
- ✓ Förhindra trycksår

▶ PUREMED överdrag

Varje STABILOBed produkt har ett separat art nr vilket gör dessa enkla att kategorisera och sammankoppla enligt varje brukares behov.

Överdraget till Stabilo Bed systemet är tillverkat av ett innovativt material som heter PureMed i grå färg. Detta har många fördelar:

- ✓ Det är säkert för användaren och lätt att decinficera, idealiskt för användning i lokaler där hög smittorisk föreligger;
- ✓ Det kan användas flera gånger, det färgar inte av sig. Det är en perfekt lösning för sjukhus eller rehabiliteringsscenter då det kan steriliseras och användas av flera brukare;
- ✓ Det är elastiskt, mjukt och lätt att forma;
- ✓ Det innehåller antibakteriella komponenter baserat på inorganisk Silver Zeolit;
- ✓ Det har Oeco-Text certifikat på grund av dess olika hudvänliga parametrar.
- ✓ Det används som överdrag i sjukhusmadrasser, operationsbord och soffor.
- ✓ Det är vattentätt och tillåter ångandning.
Det uppfyller alla essentiella krav på medicinska produkter för skilda användningsområden*

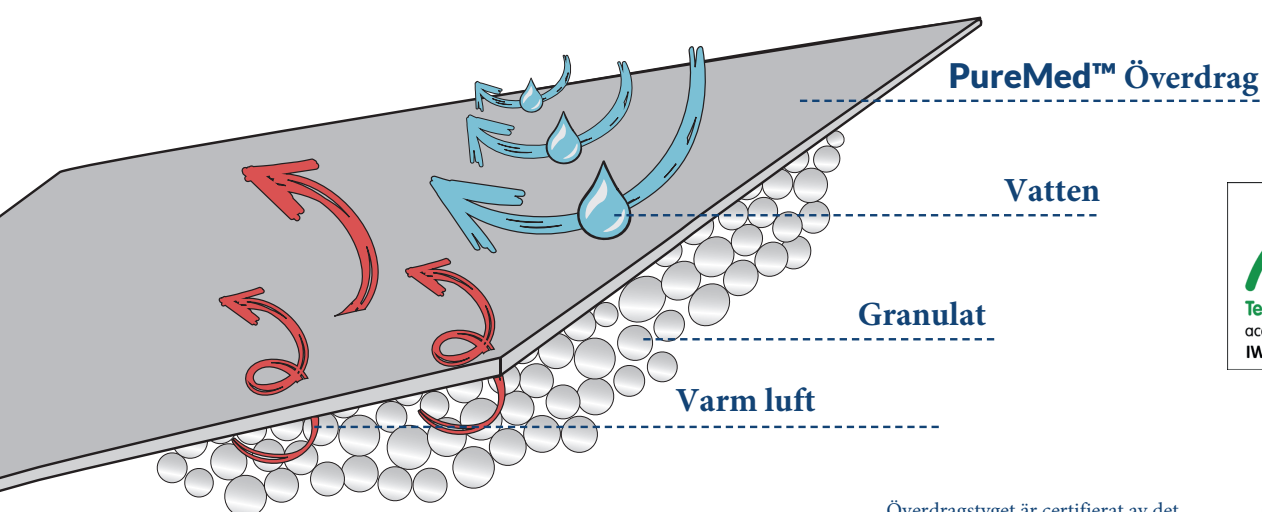

Överdragstyget är certifierat av det nationella institutet för hälsa och hygien



* According to the Regulation of the Ministers of Health on 3 November 2004 . and the requirements contained in Annex I to Council Directive 93/42 / EEC of 14 June 1993 concerning medical devices , deployed by the law of 30 April 2004 of Medical Devices (OJ L 93 of 2004 . , pos. 896).

Tekniska specifikationer PureMED™

Vikt	55 ± 10 [g/m ²]	Tensil Styrka Tvärs:	≥10 [daN/5cm]
Typ av PU beläggning	100 [%]	Vattentätthet:	≥2000 [mm H ₂ O]
POLYESTER Grundlager:	100 [%]	Ånggenomsläpplighet:	≥300 [g/m ² /24h]
Flamsäkert:	JA	Standard bredd:	145 [cm]
Tensil Styrka längs :	≥20 [daN/5cm]	Standard längd rulle:	50 [m]

Fördelar med STABILOBED



Dynorna är fyllda med olika typer av fyllning beroende på användningsområde. Dynorna finns med Granulat, VISmemo, komfort eller avlastande skum samt silikon.



PureMed™ är säkert för människor och enkelt att sterilisera. på grund av dess antibakteriella komponenter kan det användas av flera olika brukare..



Vissa delar av STABILOBed täcks av ett mjukt hudvänligt material



Vissa dynor har en service ventil för att kunna justera hur mycket granulat som finns i dynan.



Vissa STABILOBed produkter är utrustade med kardborre för att kunna fästa i i självhäftande överdrag så att dynorna inte kasar runt.



Specifika justeringsband inuti överdraget hjälper forma vissa STABILOBed produkter.

SKÖTSEL OCH REKONDITIONERING

Huvudprodukten dynan/kudden kan rengöras på följande sätt:

Produkten bör torkas av med trasa med i vården vanligt förekommande medel samt lufttorkas

Nedan finns exempel på ytterligare produkter som kan användas

Användbara decinfektionsmedel

Aktiva substanser

Substans	Procent
2-propanol	35%
1-propanol	25%
Bensyl ammoniumklorid	0,2%
Glukoprotamin	25%
Etanol	10%

Spraya produktens yta med decinfektionsmedlet och låt det verka. Skölj sedan av med vatten och låt torka

Kardborre banden samt överdragen kan rekonconditioneras enligt följande:

1. Maximal tvätttemperatur 90° C, grader celcius, milt program
2. använd inte klorlösning.
3. De kan torktumlas
4. Produkten kan ej strykas med strykjärn